VETGER rapid test

Kit de Prueba Rápida de Antígeno del Virus de Leucemia Felina (FeLV)

Solo para uso veterinario

PRINCIPIO

El Kit de Prueba Rápida de Antígeno del Virus de Leucemia Felina (FeLV) es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa del antígeno del Virus de Leucemia Felina (FeLV) en sangre total, suero o plasma felino.

El anticuerpo anti-FeLV invisible (línea T) y el anticuerpo secundario (línea C) están inmovilizados en una membrana de nitrocelulosa en la ventana de resultados.

Otro anticuerpo anti-FeLV está conjugado con partículas de oro coloidal e inmovilizado en una almohadilla de conjugado de fibra de vidrio. Cuando se aplica la muestra en el pocillo del dispositivo, el antígeno FeLV se une al conjugado de oro y migra sobre la superficie de la tira por difusión pasiva. Una línea T visible aparecerá en la ventana de resultados después de 10 minutos. La línea C debe aparecer cada vez que la prueba se realiza correctamente.

MATERIALES PROVISTOS

1. Dispositivos de prueba: 20 unidades empaquetadas individualmente
2. Botella de diluyente: 20 unidades
3. Cuentagotas: 20 unidades
4. Instrucciones de uso: 1 copia

MATERIALES REQUERIDOS NO INCLUIDOS

1. Cronómetro 2. Tubo de recolección (con/sin anticoagulantes) 3. Centrífuga 4. Micropipeta 5. Lanceta

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar entre 2~30°C en lugar seco y protegido de la luz. Válido por 24 meses (ver empaque).


RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS


- Suero: Recolectar sangre total sin anticoagulantes, dejar coagular 30 min, centrifugar.
- Plasma: Recolectar sangre con anticoagulante y centrifugar.
- Sangre total: Recolectar con anticoagulante. Si no se usa de inmediato, refrigerar (2~8°C) y usar dentro de 24 h.
- Si no se analiza de inmediato, almacenar suero/plasma a 2~8°C por 24 h o congelar a -20°C.
- Si la muestra tiene precipitados, clarificar antes de usar.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA


1. Llevar los componentes a temperatura ambiente (15~30°C).
2. Abrir el dispositivo y colocarlo en una superficie plana.
3. Añadir muestra (5 µl de suero/plasma o 10 µl de sangre total) en el pocillo.
4. Añadir 2 gotas de diluyente.
5. Leer resultados entre 10~15 minutos. Después de 15 minutos no es válido.



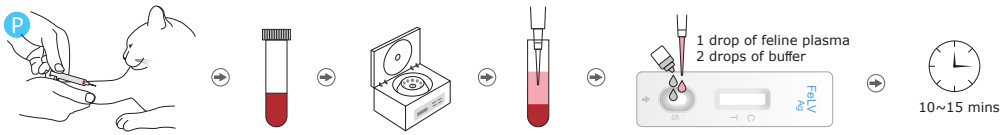

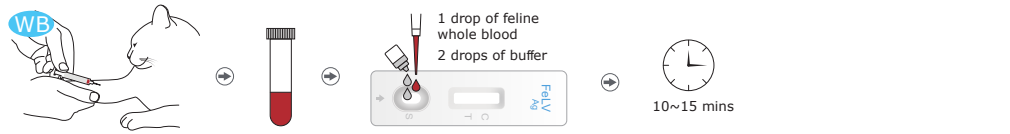

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

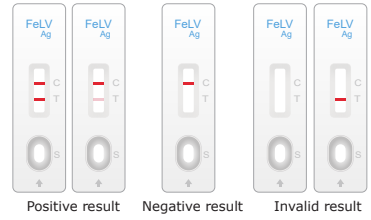

Positivo

Aparecen la línea de prueba (T) y la línea de control (C), indicando la presencia del antígeno FeLV.

Negativo:

Solo aparece la línea de control (C), indicando que no se ha detectado el antígeno FeLV.

Inválido

Si no aparece la línea de control (C), el resultado puede considerarse inválido. Se debe repetir la prueba.

PRECAUCIONES

1. El kit es solo para uso felino. No utilizar en otros animales.
2. El dispositivo es sensible a la humedad y al calor. Realice la prueba inmediatamente después de abrir el envase.
3. Lea y siga las instrucciones cuidadosamente.
4. No reutilice los componentes de la prueba.
5. No use el kit si el empaque está dañado o el sello roto.
6. No use el kit después de la fecha de caducidad indicada.
7. No mezcle componentes de diferentes lotes.
8. Todas las muestras deben manejarse como potencialmente infecciosas.
9. Descontamine y deseche todo el material potencialmente contaminado conforme a regulaciones locales y nacionales.

LIMITACIONES

1. El kit proporciona resultados rápidos, pero no excluye totalmente la posibilidad de resultados falsos por varios factores. Los veterinarios deben considerar otros síntomas clínicos y métodos de diagnóstico para una conclusión definitiva.
2. El kit solo indica si el antígeno del virus FeLV está presente o no.
3. Un resultado negativo puede deberse a concentraciones bajas del antígeno, por debajo del nivel detectable del test.

DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS

IVD	In vitro diagnostic	LOT	Batch code
	Use-by date		Consult instructions for use
	Date of manufacture		Manufacturer
2°C 30°C	Temperature limit		

IMPORTADO POR: PHARMAGER La ciencia en tus manos

VETGER rapid test