Relaxina Canina Antígeno (RLNAg) Rapid Test

USO VETERINARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO

VG-006: Canine Relaxin Antigen Rapid Test Kit

EMPAQUE

20 tests x caja

PRINCIPIO

El kit de prueba de antígeno de relajina canina adopta el principio del ensayo de inmunocromatografía de oro coloidal para detectar cualitativamente el antígeno de relajina canina en sangre/serum/plasma canino. La tira de prueba tiene una línea de prueba "línea T" y una línea de control de calidad "línea C". Cuando la muestra contiene una cantidad suficiente de antígeno de relajina canina, la línea de prueba "línea T" mostrará una banda de color púrpura-rojo. La línea C debe aparecer cada vez, lo que indica que la prueba es efectiva.

MATERIALES PROVISTOS

Cassette de prueba	20
Buffer individual	20
Gotero	20
Inserto	1

MATERIALES REQUERIDOS NO PROVISTOS

Cronómetro

ALMACENAMIENTO


Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz (2 ~ 30℃). Válido por 24 meses (ver paquete).

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN

- Muestra de prueba: sangre entera/ suero/ plasma de canino (no utilizar muestras hemolizadas o con hiperlipidemia).
- Las muestras deben ser analizadas el mismo día; las muestras que no puedan ser analizadas el mismo día deben mantenerse refrigeradas, o congeladas si exceden las 24 horas.
- La sangre completa debe recolectarse en tubos con anticoagulantes. Las muestras no deben ser congeladas. Pueden almacenarse a 2-8°C durante 3 días.


PROCEDIMIENTO

- El dispositivo de prueba, la muestra y el diluyente del ensayo deben llevarse a temperatura ambiente (15~30°C) antes de su uso. [Suero] Recoja la sangre completa en el tubo de recolección (SIN contener anticoagulantes como heparina, EDTA y citrato de sodio), deje reposar durante 30 minutos para la coagulación de la sangre y luego centrifugue para obtener el sobrenadante de suero.
- [Plasma] Recoja la sangre completa en el tubo anticoagulante (que contiene anticoagulantes como heparina, EDTA y citrato de sodio) y luego centrifugue para obtener plasma.
- [Sangre completa] Recoja la sangre completa en el tubo anticoagulante. Retire el dispositivo de prueba del sobre de aluminio y colóquelo en una superficie plana y seca.Usando un gotero, añade 1 gota (10ul/gota) de la muestra en el pozo de muestra del dispositivo de prueba.
- Agregue 3 gotas (50-60µl/gota) de diluyente de ensayo en el pozo de la muestra en posición vertical, inicie el temporizador.
- Lea los resultados en 10 a 15 minutos, y los resultados después de 15 minutos ya no son válidos.

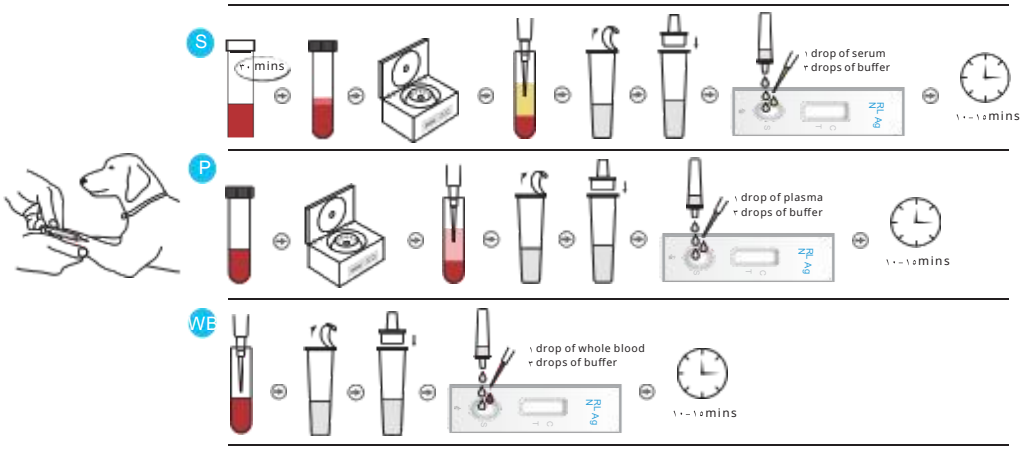

LECTURA DE RESULTADOS

Positivo:
La línea de prueba (T) y la línea de control (C) dentro de la ventana de resultados indican la presencia del antígeno RLN.
Negativo:
Solo aparece la línea de control (C) en la ventana de resultados, lo que indica que no se ha detectado el antígeno RLN y se recomienda realizar pruebas regulares.
Inválido:
Si la línea de control (C) no aparece, el resultado debe considerarse inválido debido a una operación incorrecta u otras razones. Se recomienda volver a realizar la prueba siguiendo las instrucciones. Si el problema persiste, deje de usar el producto de este número de lote y contacte al proveedor local.

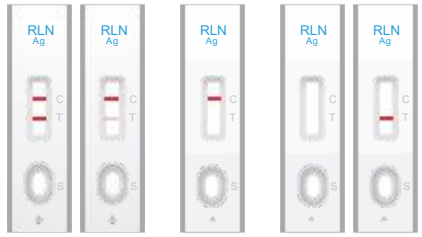

POSITIVO NEGATIVO INVÁLIDO

PRECAUCIONES

- El kit de prueba es solo para uso canino.
- No lo use en otros animales.
- Este producto es de un solo uso y no se puede reutilizar.
- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de la operación y actúe de acuerdo a ellas.
- Por favor, confirme la integridad del paquete antes de abrir el producto y asegúrese de que el producto esté dentro del período de validez.
- Almacene este producto en un ambiente seco entre 2-30°C.
- Realice las pruebas a temperatura ambiente, inmediatamente después de sacarlo del sobre de aluminio para evitar que la humedad afecte la tarjeta de prueba.
- No mezcle componentes de diferentes números de lote.
- Las muestras que han estado demasiado tiempo o contienen una cantidad excesiva de bacterias no deben usarse para evitar reacciones no específicas debido a la contaminación de la muestra.
- Decontamine y deseche todos los especímenes, kits usados y materiales potencialmente contaminados de manera segura, de acuerdo con las normativas nacionales y locales.

LIMITACIONES

- Los resultados de la prueba de este producto son solo para referencia y no deben utilizarse como la única base para el diagnóstico y tratamiento.
- Deben combinarse con síntomas clínicos u otras pruebas para un juicio integral.
- Este producto solo se utiliza para pruebas cualitativas y no puede indicar el nivel de virus en la muestra.
- Se puede obtener un resultado negativo si la concentración del virus presente en el espécimen no es adecuada o está por debajo del nivel detectable de la prueba, limitado por la sensibilidad.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: