Prueba rápida de anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa bovina serotipo O (B.FMDV-O Ab)

Uso previsto

La prueba rápida de anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa bovina serotipo O es un inmunoensayo de flujo lateral diseñado para la detección cualitativa de anticuerpos específicos contra el virus de la fiebre aftosa bovina serotipo O (B.FMDV-O) en muestras de suero o plasma.

Reactivos y materiales proporcionados

· Dispositivos de prueba
· Prospecto del paquete
·Goteros desechables

Materiales necesarios pero no proporcionados

Cronómetro

Almacenamiento y estabilidad

El dispositivo de prueba está sellado y debe almacenarse protegido de la luz a temperatura ambiente (4-30 °C). No congelar. El dispositivo de prueba debe utilizarse antes de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del envase.


Advertencias, precauciones e información de seguridad

1. El dispositivo de prueba se utiliza únicamente en bovinos.
2. Los resultados pueden verse afectados por la humedad y la temperatura.
3. Asegúrese de que la bolsa de aluminio que contiene la prueba no esté dañada antes de abrirla. Realice la prueba inmediatamente después de abrirla.
4. No reutilice los componentes de la prueba. }5. No la utilice después de la fecha de caducidad.
6. No mezcle componentes del producto de diferentes números de lote.
7. Dado que todas las muestras son potencialmente infecciosas, los operadores deben usar guantes protectores al manipularlas y lavarse bien las manos después. 8. Descontamine y deseche de forma segura todas las muestras, kits usados y materiales potencialmente contaminados, de acuerdo con las normativas nacionales y locales.

Recolección, Manejo y Transporte de Muestras

1. Esta prueba debe realizarse con suero o plasma. Suero: Recoja la sangre completa en un tubo de recolección (que no contenga anticoagulantes como heparina, EDTA ni citrato de sodio) y centrifugue para obtener el suero. Plasma: Recoja la sangre completa en un tubo de recolección (que contenga anticoagulantes como heparina, EDTA ni citrato de sodio) y centrifugue para obtener el plasma.
2. Las muestras deben almacenarse entre 2 y 8 °C. Congele las muestras a -20 °C o menos para un almacenamiento más prolongado y evite congelarlas y descongelarlas repetidamente.
3. Las muestras con precipitado pueden producir resultados incongruentes. Deben clarificarse antes del análisis.
4. Las muestras hemolizadas o contaminadas pueden producir resultados erróneos.

PASO 1 CHEQUEA EL KIT ANTES DE USAR

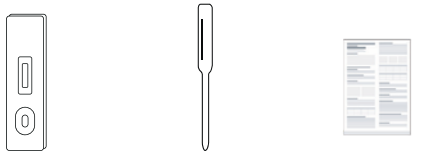

Test device | Disposable droppers | Package insert

Verifique el contenido del producto y asegúrese de que la operación de prueba se realice a temperatura ambiente (15–30 °C) antes de realizar la prueba.

PASO 2 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA



Saque el dispositivo de prueba de la bolsa de papel de aluminio y colóquelo sobre una mesa limpia y plana. Agregue tres gotas (aproximadamente 90 µl) de muestras de suero o plasma verticalmente en el pocillo de muestra (S) del dispositivo de prueba.

PASO 3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS



Lea el resultado entre 5 y 10 minutos.
El resultado es inválido después de 15 minutos.

Positivo (+): La presencia tanto de la línea “C” como de la línea “T”, sin importar si la línea T es clara o vaga.



Negativo (-): Solo aparece la línea C clara. No aparece la línea T.




No válido: no aparece ninguna línea de color en la región C, independientemente de la apariencia de la línea T.



Limitaciones

Aunque la Prueba Rápida de Anticuerpos contra el Virus de la Fiebre Aftosa Bovina (Serotipo O) es muy precisa para detectar el Serotipo O, la incidencia de resultados falsos es baja. Si se obtienen resultados cuestionables, podrían requerirse otras pruebas clínicas o de laboratorio. Al igual que con otras pruebas diagnósticas, el diagnóstico clínico definitivo no debe basarse en el resultado de una sola prueba, sino que debe ser realizado por el veterinario tras evaluar todos los hallazgos clínicos y de laboratorio.

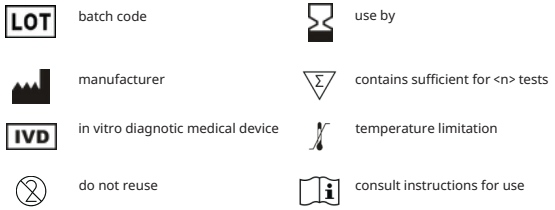

VETGER rapid test

PHARMAGER
La ciencia en tus manos